

TEC-1010 DOKU GÖMME CİHAZI




- ◆ Doku gömme işleminin tüm aşamalarını kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan tam otomatik ve kesintisiz olarak gerçekleştirir.
- ◆ Otomasyon özelliği sayesinde işleme başlama ve bitiş zamanı her birimde ayrı ayrı haftalık ve günlük olarak ayarlanır.
- ◆ Lcd ekrandan işlem basamakları izlenebilir.
- ◆ İçerisindeki özel blok sayesinde istenilen çalışma sıcaklığına rakiplerinden 3 kat daha kısa sürede ulaşır.
- ◆ Sahip olduğu filtre sistemi sayesinde ortama paraffin kokusunun yayılmasına engel olur.
- ◆ Soğutma ünitesini sıcaklığı -30 dereceye kadar düşürülebilir.
- ◆ Parafin tank kapasitesi 5 lt'dir.
- ◆ Ayak ve elle parafin akışını kontrol imkanı.
- ◆ Doku gömme sistemi ve soğutma ünitesi ayrı ayrı yada birlikte kullanılabilir.
- ◆ Mega kasetlerde uygun hızlı soğutma ünitesi mevcuttur.
- ◆ 2 adet paraffin atık tankı kesintisiz çalışmayı sağlar.
- ◆ 6 adet ısıtıcıli forseps yeri mevcuttur.
- ◆ Cihaz üzerindeki büyüteç gömme işlemi esnasında uygulama kolaylığı sağlar.

Doku Gmme Cihazı

Teknik Veriler

Gmme & Blok nitesi lleri	650x580x450mm
Parafin tankın sıcaklıđı	30-70°C
Kaset depolama nitesi sıcaklıđı	30-70°C
alıřma alanın sıcaklıđı	30-70°C
Sapma deđeri	± 1%
Sođutma nitesi sıcaklıđı	-30°C
Sođutma nitesi lleri	330x322mm
Ađırlık	29kg
Elektriksel Deđerler	AC220V 50Hz

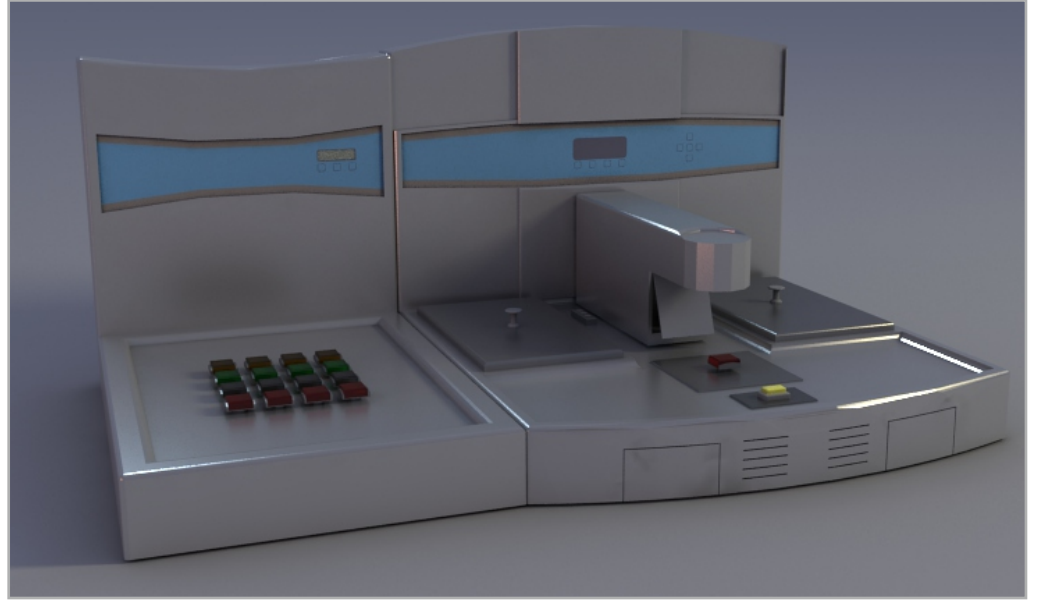

DES San. Sit. 1.Cd. D3 Bl. No:27 34776
Yukarı Dudullu, İstanbul

Tel : +90 216 365 40 99
Faks : +90 216 365 40 89

info@baygenlab.com
www.baygenlab.com