

FORMA DOSE

Otomatik Formaldehit Dozajlama Cihazı

Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı, Doğru ve Kolay Dozajlama



- TAM OTOMATİK
- DOĞRU DOZAJLAMA
- KOKUSUZ ÇALIŞMA ORTAMI
- GÜVENLİ
- GERÇEK ZAMANLI pH TAKİBİ

■ Kullanıcı Güvenliği

Kanserojen bir kimyasal olan formaldehiti solumayın, temas etmeyin.

■ Güvenilir Sonuçlar

Her zaman doğru oranda hazırlanan formalin ile yeterli fiksasyon.

■ İş Yükünün Azalması

Formalini hazırlama işini bırakın sizin yerinize cihaz yapsın.

■ Maliyetlerde Belirgin Azalma


Formaldehitinizi konsantre olarak alın maliyetlerinizi belirgin oranda düşürün.



Kokusuz ortam
için silikon.



Kullanıcı dostu
yazılım

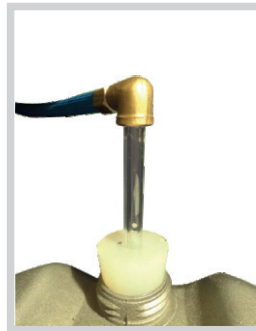

Tampon tuzların
konulduğu hazne.

ÖZELLİKLER

FORMA DOSE

Otomatik Formaldehit Dozajlama Cihazı

- Formalini musluktan direk alabilme
- Fabrika ayarlı %10'luk yada kullanıcı tanımlı formalin hazırlama seçenekleri
- Formalin miktarını ekrandan takip edebilme
- Her zaman doğru oranlarda solüsyon hazırlayabilme
- Formalinin beklemesinden kaynaklı çökelti oluşması otomatik karıştırma fonksiyonu ile engellenmiştir.
- Otomatik ve manuel karıştırma fonksiyonu
- Formalin azaldığında ve bittiğinde iki kademeli sesli ve görsel uyarı
- Tamponlu formalin hazırlayabilmek için toz veya hazır çözelti seçim imkanı
- Su veya formaldehit alımı gerçekleşirken elektrik kesintisi olduğu takdirde değerler cihazında hafızasında saklanır.
- Tank yıkama fonksiyonu
- Merkezi havalandırma sistemine bağlanabilme
- Kullanıcı dostu tuş takımı ve ekran
- Kesintisiz güç kaynağı

Genel Özellikleri

Tam otomatik
Direk musluktan alabilme
Otomatik ve manuel karıştırma
50lt veya 100lt olarak farklı kapasite seçenekleri

Ortam Gereklilikleri

Ortam Sıcaklığı: 20-50°C
Nem Oranı: %80 kondens damlasız

Elektriksel Özellikler

Voltaj: 210-230 AC
Akım: 8A
Frekans: 50-60Hz

Fiziksel Özellikler



Ölçüler (ExDxY) : 65x86x145cm
Ağırlık : 145kg



DES Sanayi Sitesi 1. Cadde
D-3 Blok No:27 34776
Dudullu İstanbul

Tel : +90 216 365 40 99
Fax : +90 216 365 40 89

www.baygenlab.com

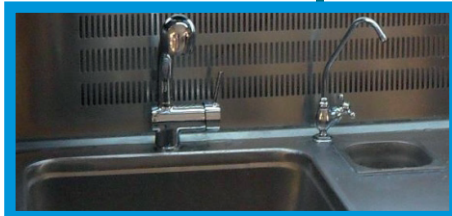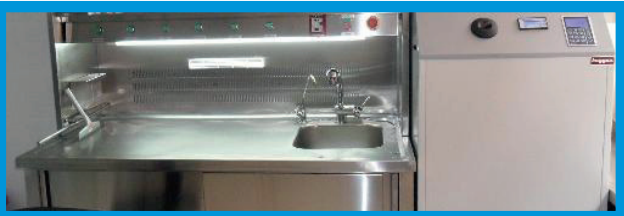

baygen